


De nieuwe generatie sluitingen

Fidlock werd opgericht om gebruiksvriendelijke magnetische sluitingen met een aantrekkelijk design te creëren. De sluitingen gaan automatisch dicht en kunnen eenvoudig met één hand geopend worden. Bij het sluiten, bewegen de magneten naar elkaar toe onder invloed van de aantrekkingskracht en zodra de magneten elkaar raken, blijven die automatisch stevig vastzitten dankzij de mechanische knipsluiting.

Deze innovatieve producten werden ontworpen voor sluitingen die heel zwaar belast worden.

Volgende producten bieden wij aan uit stock:

40-00-0500	Magnetische V-gesp 25-25	6,70
40-00-0501	Magnetische V-gesp 25-40	7,35
40-00-0502	Magnetische haak aluminium 25	14,85
40-00-0503	Magnetische haak aluminium 40	20,85
40-00-0504	Magnetische haak tuimelaar 25	6,90

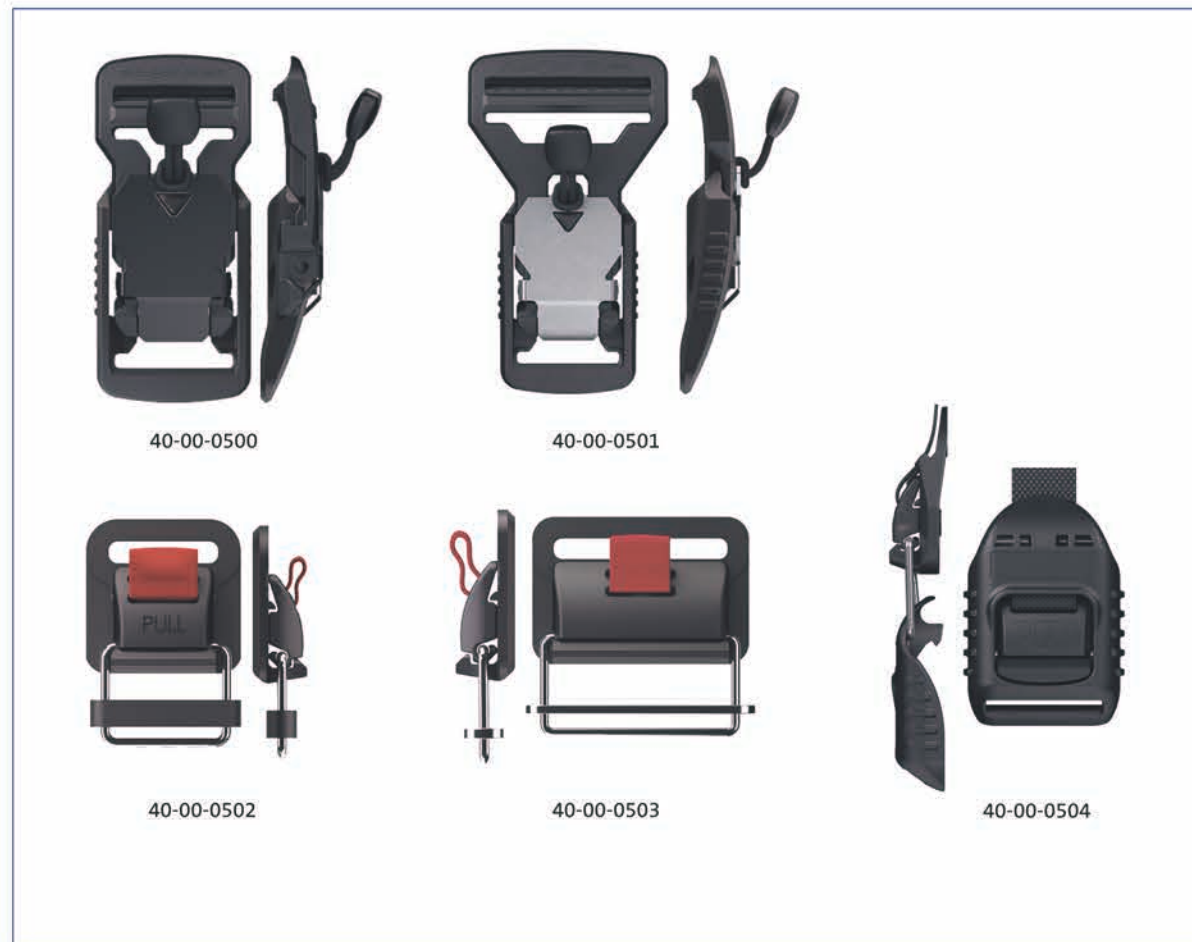

Voor bijkomende info aarzel niet ons te contacteren.

Alle prijzen exclusief 21% BTW.

Straps, gespen, comfortkussens en sluitingen voor orthopedische toepassingen

NIEUW

BMC lanceert nieuwigheden van 2 innovatieve fabrikanten : Astra en Fidlock

Straps, gespen en comfortkussens gesoldeerd met hoge frequentie

De producten van Astra omvatten straps, gespen en comfortkussens voor orthopedische toepassingen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken en **voordelen** bij het gebruik van deze nieuwe producten:

- Eerst worden onze straps op pvc of PU **gesoldeerd met hoge frequentie**. Dus geen lijm en naden, wat een garantie biedt voor hygiëne en veiligheid.
- Met onze **exclusieve techniek** kunnen wij **op elk oppervlak** tussen de klittenband en het pvc of textiel solderen met HF en dat biedt dan weer een garantie voor stevigheid.
- Wij gebruiken enkel klittenband van orthopedische **topkwaliteit** die zich perfect **vasthecht en niet verschuift** en tot 3000 keer los- en vastgemaakt kan worden: een garantie voor **stevigheid en duurzaamheid**. Bovendien voldoet onze zelfhechter aan de **REACH-** en **Oeko-Tex-normen**.
- Onze metalen gespen worden **gesoldeerd in de naad** en kunnen een gewicht van tientallen kilo's aan. Ze zijn ook behandeld met een **hypoallergene** en **antibacteriële** legering: dit biedt de patiënt de nodige garanties voor **stevigheid** en **hygiëne**.
- De gespen zijn verkrijgbaar in diverse **kleuren, materialen** en **afmetingen**.

Wat is hoge frequentie (HF)?

HF is een methode waarbij binnen een perimeter een wisselend magnetisch veld wordt gecreëerd waarin de materie, zodra die polariseerbaar is, begint te trillen en dus opwarmt. Zo kunnen we zonder een directe vlam een heel nauwkeurig smeltpunt van het polymeer bereiken.

Dankzij dit smeltpunt kunnen we verschillende materialen versmelten om die vervolgens te solderen. De soldering is zo sterk dat de gesoldeerde materialen samen soms nog cohesiever zijn dan op zichzelf.


Volgende producten hebben wij in stock:

40-00-0001	Strap PVC 39 x 400 mm wit	4,25
40-00-0002	Strap PVC 39 x 400 mm blauw	4,25
40-00-0003	Strap PVC 39 x 400 mm zwart	4,25
40-00-0004	Strap PVC 39 x 400 mm zwart carbon	4,25
40-00-0005	Strap PU 39 x 400 mm wit	4,25
40-00-0006	Strap PU 39 x 400 mm zwart	4,25
40-00-0100	Gesp PVC 38 x 60 mm wit	1,65
40-00-0101	Gesp PVC 38 x 60 mm blauw	1,65
40-00-0102	Gesp PVC 38 x 60 mm zwart	1,65
40-00-0103	Gesp PVC 38 x 60 mm zwart carbon	1,65
40-00-0104	Gesp PU 38 x 60 mm wit	1,65
40-00-0105	Gesp PU 38 x 60 mm zwart	1,65
40-00-0200	Comfortkussen PVC 64 x 140 mm wit	4,48
40-00-0201	Comfortkussen PVC 64 x 140 mm blauw	4,48
40-00-0202	Comfortkussen PVC 64 x 140 mm zwart	4,48
40-00-0203	Comfortkussen PVC 64 x 140 mm zwart carbon	4,48
40-00-0204	Comfortkussen PU 64 x 140 mm wit	4,48
40-00-0205	Comfortkussen PU 64 x 140 mm zwart	4,48

Strap



Comfortkussen

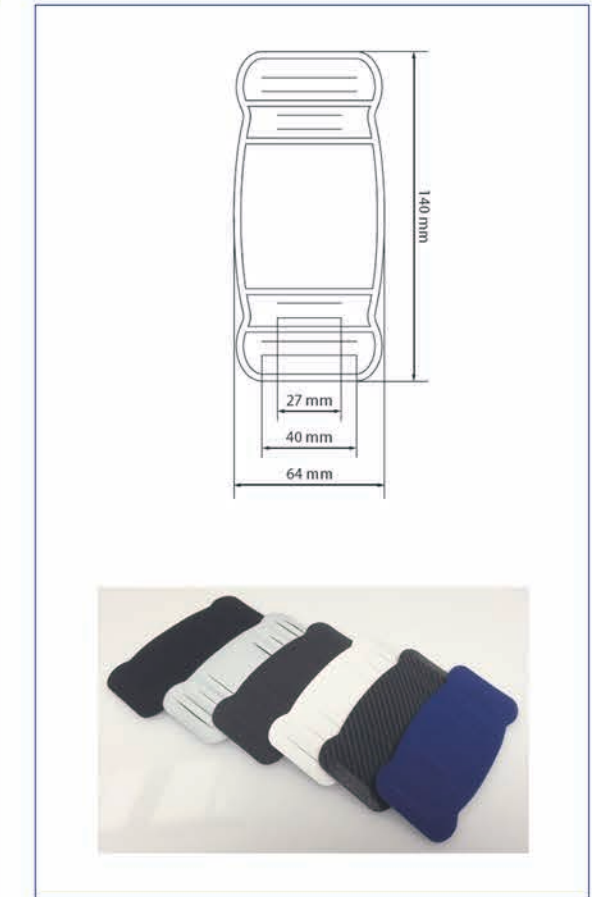

Gesp

